

DGGE Marker IV (8 fragments)

I. 製品説明

本品は DGGE (変性剤濃度勾配ゲル電気泳動) 用の DNA マーカーである。

あらかじめ Loading Buffer が添加されているので、ゲルにそのままアプライすることができる。

検出は SYBR®Gold、SYBR®Green I または臭化エチジウムで行う。

II. 保存

-20°C

III. 濃度

80 ng / 5 µl

IV. 形状

10 mM Tris-HCl (pH 8.0)

10 mM EDTA

0.025% Bromophenol Blue

35% Glycerol

V. 備考

本品は、(国) 農業環境技術研究所が、農林水産省受託プロジェクト「土壤微生物相の解明による土壤生物性の解析技術の開発」において、土壤中の細菌・糸状菌・線虫相を解析するために開発したものです。土壤からの DNA 抽出、PCR、DGGE 等の分析条件の詳細については、土壤微生物学会誌「土と微生物」Vol.62, No.1 (2008 年 4 月) をご参照下さい。


VI. 使用例

変性剤濃度

20%



45%

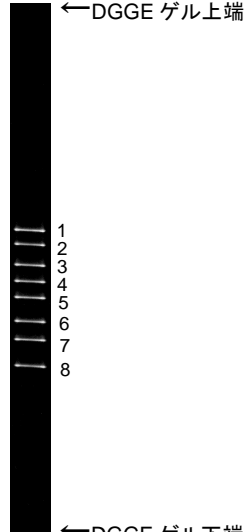

VII. 注意

DGGE Marker の泳動パターンは、電圧や泳動時間、温度、変性剤やアクリルアミドの濃度等、泳動条件によって異なる場合があります。

本品は、試薬 (試験研究用) として販売しているものです。
医薬品の用途には使用しないでください。